

HEMOSTATYKI WCHŁANIALNE

MEDITAMP® EXTRA

MEDITAMP® ORIGINAL

MEDITAMP® DENSO KNIT

MEDITAMP® FIBRISOFT

100%
WCHŁANIALNOŚCI

▲ System naturalnie wchłanialnych hemostatyków

Prawie wszystkie zabiegi chirurgiczne wymagają szybkiej i skutecznej hemostazy. W celu spełnienia potrzeb naszych klientów stworzyliśmy serię nowoczesnych i skutecznych materiałów hemostatycznych: Meditamp Extra, Meditamp Original, Meditamp Denso Knit oraz Meditamp Fibrisoft. Każdy z tych materiałów jest gotowy do użycia we wszystkich dziedzinach chirurgii. Meditamp Extra, Meditamp Original, Meditamp Denso Knit oraz Meditamp Fibrisoft opracowane zostały w celu tamowania krwawienia kapilarnego oraz z organów miękkich, a także w obszarach resekcyjnych w trakcie zabiegów chirurgicznych. Tworzenie się skrzepu następuje po 3-4 minutach od kontaktu hemostatyku z krwią.

MEDITAMP EXTRA

utleniona celuloza (OC),
uniwersalny hemostatyk

MEDITAMP ORIGINAL

utleniona regenerowana
celuloza (ORC),
uniwersalny hemostatyk

MEDITAMP DENSO KNIT

utleniona regenerowana
celuloza,
gęsto tkany hemostatyk,
szybka hemostaza

MEDITAMP FIBRISOFT

utleniona regenerowana
celuloza (ORC),
hemostatyk warstwowy
do precyzyjnej aplikacji



Wskazania:

- ▲ chirurgia ogólna i przewodu pokarmowego
- ▲ neurochirurgia
- ▲ chirurgia plastyczna
- ▲ ortopedia
- ▲ ginekologia
- ▲ urologia
- ▲ stomatologia
- ▲ traumatologia
- ▲ inne dziedziny chirurgii

Bezpieczeństwo i korzyści stosowania:

- ▲ działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram(-) i gram (+), w tym takich antybiotykoopornych szczepów jak MRSA (metycyloooporny gronkowiec złocisty), VRE (wankomycynooperne enterokoki), PRSP (penicyliooporne pneumokoki), MRSE (metycyloooporny gronkowiec skórny)
- ▲ produkt pochodzenia roślinnego
- ▲ wchłanialny w 100%, minimalna reakcja tkankowa
- ▲ nie przywiera do rękawiczek i narzędzi chirurgicznych
- ▲ niskie pH produktu

Działanie:

- ▲ Meditamp Extra, Meditamp Original, Meditamp Denso Knit oraz Meditamp Fibrisoft aplikowane są bez uprzedniego zwilżenia wodą. Przy kontakcie z krwią materiał działa jak fizyczna macierz, która pomaga utworzyć skrzep w ciągu 3-4 minut. Przywiera ściśle do rany skutecznie zamykając naczynia krwionośne i tym samym tamuje krwawienie
- ▲ produkt ulega całkowitemu wchłonięciu po implantacji w ciągu 7-14 dni



MEDITAMP® EXTRA

UTLENIONA RESORBOWALNA CELULOZA



▲ MEDITAMP EXTRA – uniwersalny hemostatyk

MEDITAMP EXTRA jest uniwersalnym hemostatykiem zalecanym w większości zabiegów chirurgicznych. Zapewnia szybką hemostazę i ulega całkowitemu wchłonięciu. Jego włóknista struktura jest stabilna, dzięki czemu produkt można szyć i ciąć bez efektu strzępienia.

Kod produktu	Nazwa produktu	Rozmiar produktu [cm]	Ilość/ opakowanie
MTE 5125	Meditamp Extra	5 x 1,25	12
MTE 575	Meditamp Extra	5 x 7,5	12
MTE 57	Meditamp Extra	5 x 7	12
MTE 7510	Meditamp Extra	7,5 x 10	12
MTE 1020	Meditamp Extra	10 x 20	12
MTE 535	Meditamp Extra	5 x 35	12

Inne rozmiary są również dostępne



MEDITAMP® ORIGINAL

UTLENIONA REGENEROWANA CELULOZA



▲ MEDITAMP ORIGINAL – uniwersalny hemostatyk

MEDITAMP ORIGINAL jest uniwersalnym hemostatykiem zalecanym w większości zabiegów chirurgicznych. Zapewnia szybką hemostazę i ulega całkowitemu wchłonięciu. Jego włóknista struktura jest stabilna, dzięki czemu produkt można szyć i ciąć bez efektu strzępienia.

Kod produktu	Nazwa produktu	Rozmiar produktu [cm]	Ilość/ opakowanie
MTO 5125	Meditamp Original	5 x 1,25	12
MTO 575	Meditamp Original	5 x 7,5	12
MTO 57	Meditamp Original	5 x 7	12
MTO 7510	Meditamp Original	7,5 x 10	12
MTO 1020	Meditamp Original	10 x 20	12
MTO 535	Meditamp Original	5 x 35	12

Inne rozmiary są również dostępne



MEDITAMP® DENSO KNIT

UTLENIONA REGENEROWANA CELULOZA



▲ **MEDITAMP DENSO KNIT** – tkany hemostatyk o wysokiej gęstości

MEDITAMP DENSO KNIT dzięki delikatnej strukturze włókien zapewnia szybką hemostazę, wyższą wytrzymałość opatrunku oraz oferuje możliwość tamowania bardziej intensywnego krwawienia. Pozwala to rozszerzyć zakres stosowania produktu.

Kod produktu	Nazwa produktu	Rozmiar produktu [cm]	Ilość/ opakowanie
MTDK 2626	Meditamp Denso Knit	2,6 x 2,6	12
MTDK 76102	Meditamp Denso Knit	7,6 x 10,2	12
MTDK 15223	Meditamp Denso Knit	15,2 x 23	12

Inne rozmiary są również dostępne



MEDITAMP® FIBRISOFT

UTLENIONA REGENEROWANA CELULOZA



▲ **Meditamp Fibrisoft** – precyzyjny hemostatyk


Warstwowa struktura **Meditamp Fibrisoft** pozwala na precyzyjną aplikację i podanie odpowiedniej porcji preparatu, jak również na szybką hemostazę. Dzięki unikalnej strukturze produktu można go uformować w żądany kształt. Produkt daje doskonałą adaptację tkankową oraz posiada zdolność przylegania.

Kod produktu	Nazwa produktu	Rozmiar produktu [cm]	Ilość/ opakowanie
MTF 2651	Meditamp Fibrisoft	2,6 x 5,1	10
MTF 51102	Meditamp Fibrisoft	5,1 x 10,2	10
MTF 102102	Meditamp Fibrisoft	10,2 x 10,2	10

Inne rozmiary są również dostępne



WOSK KOSTNY

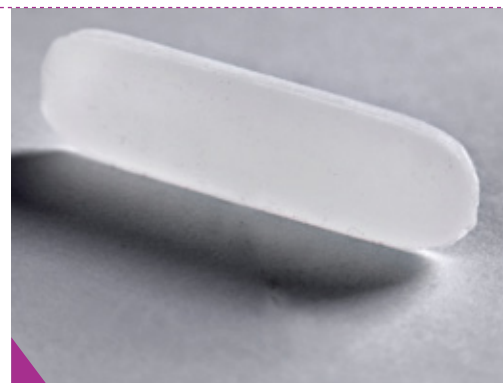

▲ Wosk kostny 3-składnikowy. Szybka hemostaza w tkance kostnej

Wosk kostny **BONEWAX** został tak zaprojektowany, aby zapewnić szybką, mechaniczną hemostazę w tkance kostnej. Bonewax jest kompozycją trzech wysokiej jakości składników:

- ▲ wosku pszczelego,
- ▲ parafiny,
- ▲ palmitynianu izopropylu.

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Wystarczy rozgrzać go w dłoniach chwilę przed nałożeniem.

Wosk kostny **BONEWAX** zapewnia miejscową hemostazę kostną dzięki działaniu jako bariera mechaniczna (tampon). Nie ma działania biochemicznego.

Zastosowanie


Wosk kostny Bonewax jest polecany do wielu procedur chirurgicznych w:

- ▲ traumatologii,
- ▲ ortopedii,
- ▲ operacjach klatki piersiowej,
- ▲ neurochirurgii,
- ▲ chirurgii szczękowo-twarzowej,
- ▲ chirurgii ogólnej,
- ▲ chirurgii plastycznej.

Bezpieczeństwo i korzyści

- ▲ Łatwe i wygodne otwieranie opakowania umożliwiające natychmiastową aplikację.
- ▲ Łatwe formowanie i nakładanie oraz skuteczne usuwanie nadmiaru wosku dzięki miękkiej i plastycznej strukturze.
- ▲ Szybka hemostaza w przeciągu kilku minut.

Kod produktu	Nazwa produktu	Rozmiar produktu [g]	Ilość/ opakowanie
BW 25	BONEWAX	2,5 g	12

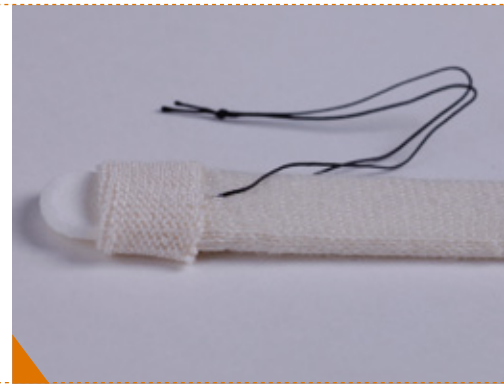

▲ Skuteczny pooperacyjny tampon donosowy

Tampon donosowy **NASAL SPONGE** to gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej.

- ▲ Gąbka PVA ze sznurkiem,
- ▲ Gąbka PVA ze sznurkiem oraz z rurką silikonową ułatwiającą oddychanie,
- ▲ Gąbka PVA ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną.

Optymalnie dobrana struktura gąbki zapewnia doskonałe właściwości hemostatyczne. Opatrunek dopasowuje się do anatomicznego kształtu jamy nosowej. Nie przykleja się do tkanki, zmniejszając tym samym ewentualne powikłania, takie jak skrzepy lub krwawienie.

Tampon donosowy Nasal Sponge posiada podwójną funkcję hemostatyczną:

- ▲ Wchłanianie płynów ustrojowych i tworzenie żelu przez zewnętrzną warstwę z gazy hemostatycznej,
- ▲ Krzepnięcie krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy (podczas kontaktu żelu z powierzchnią rany).

Zastosowanie

- ▲ Krwawienia z nosa i pooperacyjna hemostaza zatoki przynosowej oraz jamy nosowej.

Bezpieczeństwo i korzyści

- ▲ Bezpieczny w użyciu, bez występowania skutków ubocznych.
- ▲ Szybka hemostaza.
- ▲ Zapewnienie wilgotnego środowiska w otoczeniu rany i przyspieszenie procesu gojenia.
- ▲ Brak zjawiska przyklejania się tamponu do rany.
- ▲ Mniejsze ryzyko wystąpienia urazu wtórnego.
- ▲ Łatwość użycia.
- ▲ Bezbolesna aplikacja i usunięcie tamponu.

Sposób działania

- ▲ Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po kontakcie z krwią, uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy.
- ▲ Wewnętrzna gąbka może ulec rozprężeniu w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy przez ucisk.
- ▲ Żelowa struktura gazy hemostatycznej zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Kod produktu	Nazwa produktu	Opis produktu	Rozmiar produktu [cm]	Ilość sztuk w opakowaniu
NS1002515GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	10 × 2,5 × 1,5	10
NS1002015GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	10 × 2 × 1,5	10
NS1001510GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	10 × 1,5 × 1	10
NS802515GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	8 × 2,5 × 1,5	10
NS802015GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	8 × 2 × 1,5	10
NS801510GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	8 × 1,5 × 1	10
NS552515GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	5,5 × 2,5 × 1,5	10
NS552015GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	5,5 × 2 × 1,5	10
NS551510GS	Nasal Sponge	z gazą i sznurkiem	5,5 × 1,5 × 1	10
NS1002515S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	10 × 2,5 × 1,5	10
NS1002015S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	10 × 2 × 1,5	10
NS1001510S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	10 × 1,5 × 1	10
NS802515S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	8 × 2,5 × 1,5	10
NS802015S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	8 × 2 × 1,5	10
NS801510S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	8 × 1,5 × 1	10
NS552515S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	5,5 × 2,5 × 1,5	10
NS552015S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	5,5 × 2 × 1,5	10
NS551510S	Nasal Sponge	bez gazy, ze sznurkiem	5,5 × 1,5 × 1	10
NS802015SA	Nasal Sponge	ze sznurkiem i rurką, bez gazy	8 × 2 × 1,5	10
NS452015SA	Nasal Sponge	ze sznurkiem i rurką, bez gazy	4,5 × 2 × 1,5	10

Inne rozmiary są również dostępne



MDD Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159A
87-100 Toruń POLAND

☎: +48 22 10 10 410

www.mddpl.com